




四川大学

华西第二医院 | 华西妇产儿童医院

West China Second University Hospital / West China Women's and Children's Hospital

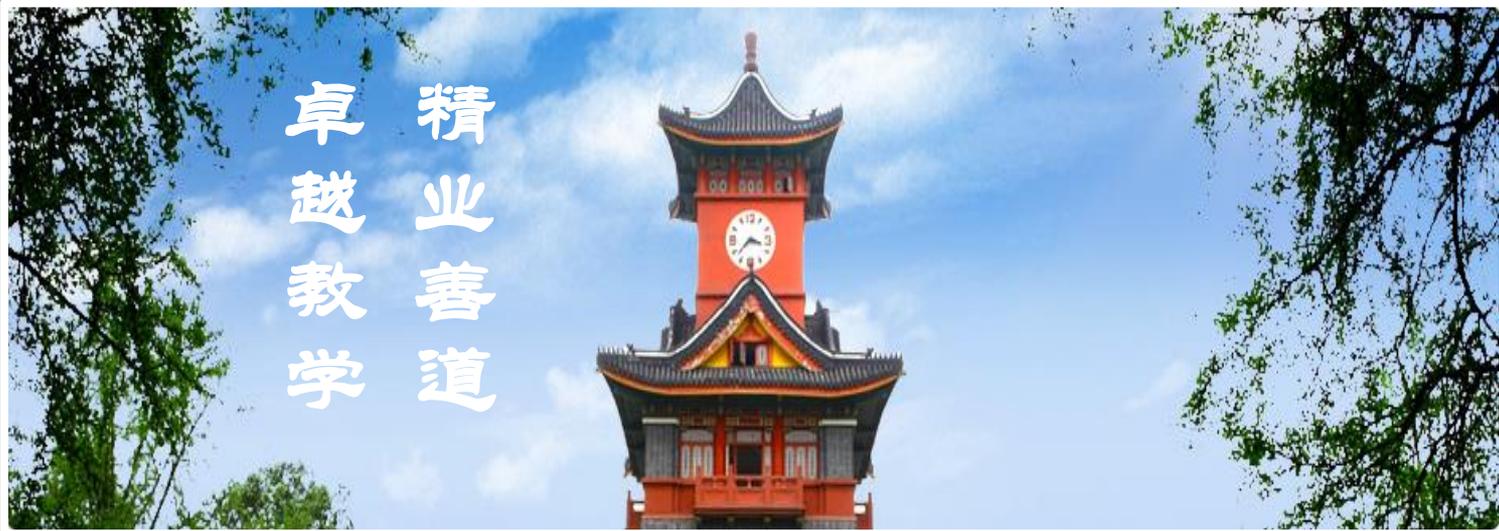

气压治疗

产科



目录页



1

气压治疗

2

使用管理及日常维护

3

使用注意事项要点



第一部分


气压治疗

- ◆原理
- ◆目的
- ◆适应症、禁忌症
- ◆操作步骤

气压治疗的原理

➤通过加速下肢静脉血流速度，促进淤血静脉排空，产生快速搏动性的血流对血管壁形成冲刷，防止血栓形成

➤增加纤溶系统的活性

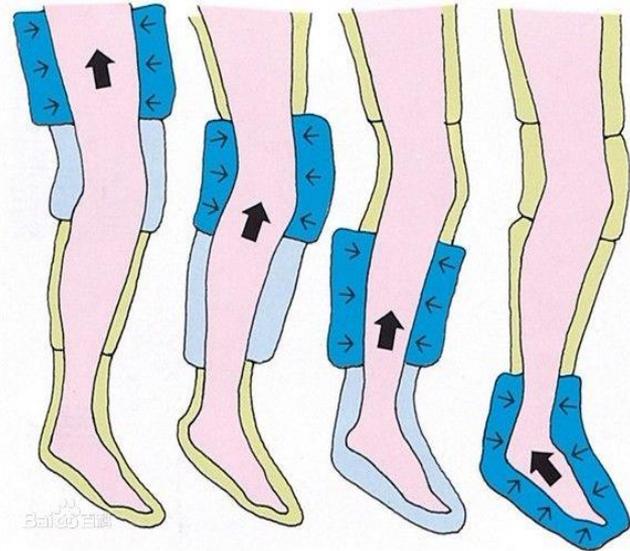

气压治疗的目的

1. 改善循环，防止下肢深静脉血栓形成
2. 防止肌肉萎缩



适用范围

适用范围

适应症

长期卧床者
静脉瘀滞性溃疡
防止肌肉萎缩
预防深静脉血栓

禁忌症

高血压，心脏病慎用
急、慢性心力衰竭禁用
深静脉血栓形成禁用
肢体重度感染未得到有效控制禁用
大面积溃疡性皮肤病禁用
有出血倾向者禁用者



气压治疗操作流程

操作准备

查对、宣教

- ◆ 查对腕带、姓名、登记号、医嘱内容
- ◆ 向产妇解释操作目的并取得同意

评估

- ✓ 病史：有无禁忌症
- ✓ 全身及局部肢体皮肤情况
- ✓ 有无其他需要：大小便、哺乳、进食等
- ✓ 病房环境

用物

证实性能良好空气压力治疗仪（必要时备多用插头），复方新洁灵、快速手消毒液，治疗单，笔，袜子、裤子（患者自备）。



气压治疗操作流程

操作流程

1. 查对。
2. 接上电源，打开主机开关，检查仪器。
3. 助患者取安全舒适卧位，穿裤子袜子
4. 将治疗仪套筒穿在患者肢体上
5. 连接通气筒，打开开关
6. 按需要调整模式（一般+或-）时间(10分钟)
能量选择（45-50）
7. 核对后按确认键开始
8. 观察机器运转情况，保持工作状态，观察患者面色及表情，如有不适及时停止



气压治疗操作流程

操作 后处 理

1. 治疗结束后，取下套筒，关机并拔下电源插头。

2. 观察局部肢体皮肤情况，安置患者舒适体位

3. 收拾用物，清洁消毒套筒。

4. 洗手，查对，记录，签名，进行健康宣教。





第二部分

使用设备及日常维护

使用管理及日常维护

1. 放置气压治疗仪的环境应防尘、防潮，定期清洁治疗仪表面；
2. 每天治疗结束时，应切断电源；
3. 定期检查仪器线路；
4. 定期检查仪器部件；
5. 保持桶套的清洁，使用后及时清洁和消毒，防止交叉感染。
6. 仪器每次使用结束后，应用软布擦拭仪器表面。





第三部分

使用安全注意事项

使用注意事项要点

1. 应由经过培训的临床工作人员进行操作；
2. 每次治疗前后均应检查产妇双下肢；
3. 治疗过程中应注意观察并询问产妇的感觉，根据情况及时调整治疗压力；
4. 插上或拔下电源线前，先关闭主机电源；
5. 禁止非仪器操作者随意接触面板控制键，以免因违反操作规则，引起程序保护性自锁；
6. 产妇如有暴露的肢体/部位，请注意穿一次性腿套，防止交叉感染及皮肤损伤；
7. 治疗过程中多巡视病人，及时处理异常**自觉症状**。



谢谢观看

